



MANUAL DO USUÁRIO

Produtos:

BIOMAT PRO 70 x 188 cm – 20 Kg Tensão: 127V - 60 Hz 220V - 60 Hz	BIOMAT MINI 33 x 85cm - 3,8kg Tensão: 127V - 60 Hz 220V - 60 Hz
---	--

PORTUGUÊS

Conteúdo

1. Itens fornecidos	02	4.6 Selecionando o tempo de desligamento automático.....	05
1.1 Descrição do controlador de temperatura.....	02	4.7 Desativar	07
2. Informações Importantes para referência futura.....	03	5. Limpeza e cuidados.....	07
3. Uso indicado da manta.....	04	6. Conservação	07
4. Utilização.....	04	7. Descarte	08
4.1 Segurança.....	04	8. Solução de problemas	08
4.2 Operação.....	04	9. Dados técnicos	08
4.3 Ligar.....	05		
4.4 Ajuste de temperatura.....	05		
4.5 Recuo automático.....	05		

Explicação dos símbolos

	Leia as instruções!		Não lavável à máquina
	Não perfure com agulhas!		Não use secador
			Não use ferro
	Não use enquanto dobrado ou amassado! Não dobre enquanto aquecido!		Não lave a seco
	Aviso: adverte para perigos de ferimentos ou perigos para a saúde.		
	ATENÇÃO: instruções de segurança relativas a eventuais danos no aparelho/acessórios.		
	INDICAÇÃO: indica informações importantes.		

1. Itens fornecidos

- 1 Manta elétrica térmica
- 1 Manta protetora 100% de algodão
- 1 Controlador de temperatura
- 1 Instruções de uso

1.1 Descrição do controlador de temperatura

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Interruptor geral | 4. Timer |
| 2. Tela | 5. Interruptor de ligar/desligar |
| 3. Botão de ajuste da temperatura | 6. Plugue |

2. Informações importantes para referência futura



Aviso

- A não observância das seguintes instruções pode resultar em ferimentos pessoais ou danos materiais (choque elétrico, queimadura cutânea ou incêndio). As seguintes indicações de perigo e segurança não são apenas utilizadas para proteger a sua saúde ou a saúde de terceiros, mas também para proteger o produto. Respeite estas instruções de segurança e se o produto for entregue a outra pessoa, forneça também o manual de instruções.
- Esta manta elétrica não deve ser usada por pessoas insensíveis ao calor que são incapazes de reação ao superaquecimento.
- Esta manta elétrica não deve ser usada por crianças muito pequenas (0 a 3 anos)
- Esta manta elétrica não deve ser usada por crianças (3-8 anos), a menos que o interruptor seja ajustado por um de seus pais ou outra pessoa responsável.
- Esta manta elétrica pode ser usada por crianças acima de 8 anos de idade, assim como por pessoas com faculdades físicas, sensoriais ou mentais limitadas, ou com pouca experiência ou conhecimento, desde que monitorados por um adulto que saiba usá-la com segurança.
- As crianças nunca devem brincar com a manta elétrica.
- Não introduzir agulhas.
- Não use dobrada ou enrolada.
- Não dobre enquanto aquecida.
- Não use molhada.
- Limpe manualmente.
- Não coloque o produto entre o colchão e o box da cama.
- Antes de usar a manta em uma cama ajustável, certifique-se de que os cabos não estão presos em dobradiças ou enrolados.
- O fio de corrente elétrica deve ficar na parte de CIMA da cama.
- Esta manta elétrica somente deve ser usada com o controlador de temperatura original da mesma.
- Os campos magnéticos e elétricos que saem desta manta elétrica podem interferir em determinadas circunstâncias no funcionamento de marcapassos. Não use a manta em pessoas portadoras de marca-passo.
- Não puxe os fios, torça ou dobre-os.

- Para reduzir o risco de choque eléctrico, não abra ou produto. Para reparos, contate a assistência técnica autorizada.
- Se o cabo de alimentação do aparelho estiver danificado, envie o equipamento para o serviço de assistência técnica autorizada, a fim de evitar perigos.
- Se você ainda tiver dúvidas sobre como usar a manta eléctrica Biomat, entre em contato com nosso serviço ao cliente.

3. Uso indicado da manta



Atenção

Esta manta eléctrica é indicada para o aquecimento de camas e colchões, para relaxamento e bem-estar.

4. Utilização

4.1 Segurança




Atenção

A manta eléctrica tem um sistema de segurança. Esta tecnologia do sensor impede o superaquecimento da manta.

4.2 Operação

- Colocar a manta eléctrica sobre a cama, começando com a área do pé da cama, esticando bem sobre o colchão.
- Então colocar a manta protetora de algodão sobre a manta eléctrica.
- Use o produto em cima de um colchão ou no chão com a etiqueta sempre para baixo.

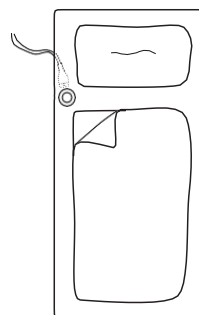

Atenção

Certifique-se de que a manta eléctrica esteja completamente estendida e que nenhum vinco ou dobra seja formado durante o seu uso.


- Primeiro conecte o interruptor ao elemento de aquecimento onde o plug-in está anexado.
- Em seguida, ligue a tomada.

4.3 Ligar

Deslize o interruptor de ligar/desligar lateralmente para a posição “on” no interruptor para ligar a manta elétrica. Quando estiver ligado, o visor acende-se e durante aproximadamente 2 segundos todos os segmentos do mesmo são apresentados.

4.4 Ajuste de temperatura

Pressione o botão “temperature up” e “temperature down” para ajustar os níveis de temperatura.

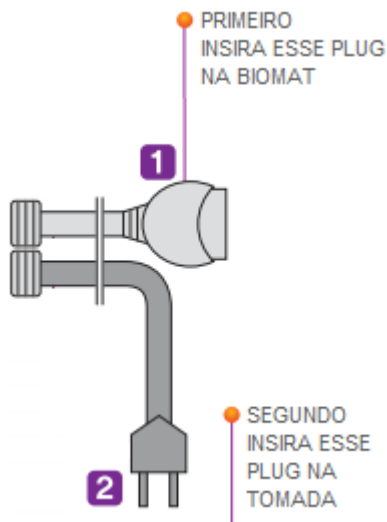

Aviso

- Se a manta elétrica for usada por diversas horas, nós recomendamos ajustar o mais baixo nível de temperatura no interruptor para evitar superaquecimento do usuário.



Indicação

- Para que a manta elétrica aqueça o mais rapidamente possível, ajuste para o nível máximo de temperatura e depois ajuste conforme desejado.

4.5 Recuo Automático




Indicação

Esta manta elétrica tem uma função automática de segurança. Quando nos níveis de temperatura alta, ela automaticamente regressa ao nível de temperatura baixa após aproximadamente 4 horas de uso ininterrupto.


4.6 Selecionando o tempo de desligamento automático

Pressione o botão de ajuste automático de tempo. O tempo de desligamento automático pode ser ajustado opcionalmente por horas, de 2 a 12.

BIOMAT PROFISSIONAL

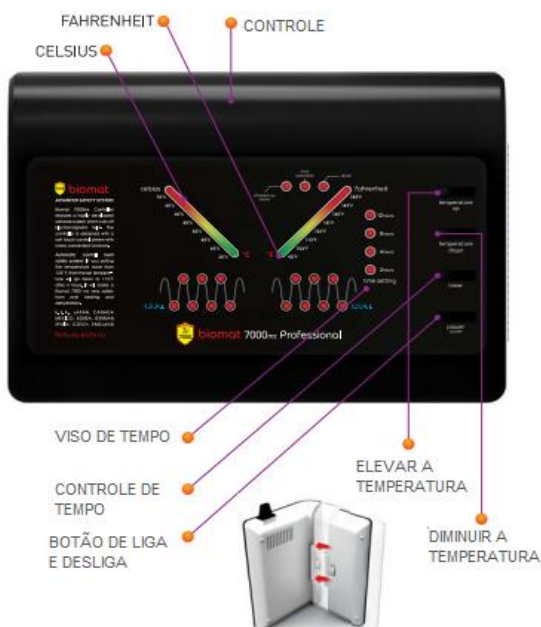

BIOMAT MINI

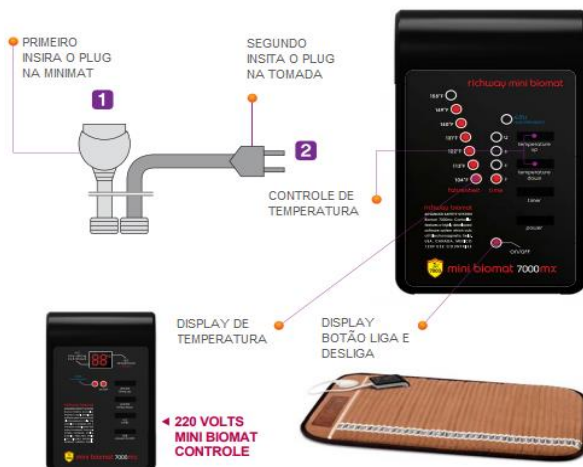

4.7 Desativar

Deslize o interruptor de ligar/desligar para a posição OFF no interruptor para desligar a manta eléctrica. Ao fazê-lo, as indicações de iluminação e de visualização também desligam.

Indicação

Se a manta eléctrica não for usada por vários dias, ajuste o controle deslizante para a posição OFF e desligue a fonte da tomada eléctrica.

Indicação

O ambiente mais saudável do sono é obtido mantendo o quarto fresco e a cama aquecida.

5. Limpeza e cuidados



Aviso

- Antes de limpar a manta eléctrica, desligue o controlador de temperatura, retire a fonte de energia da tomada e separe o acoplamento de encaixe da manta. Se isso não for seguido, haverá perigo de choque eléctrico.



Atenção

- O interruptor nunca deve entrar em contato com água ou outros líquidos, uma vez que pode ser danificado.
- Para limpar o interruptor, utilize apenas um pano seco e sem fiapos. Não utilize produtos de limpeza químicos ou abrasivos.
- As pequenas manchas sobre a manta eléctrica podem ser removidas com um pano úmido e um pouco de detergente líquido suave.



Atenção

- Por favor, note que a manta eléctrica não deve ser limpa a seco, torcida, seca em secador eléctrico ou passada.
- Esta manta eléctrica não pode ser lavada a máquina.

6. Conservação

Se você não for usar a manta eléctrica por um longo período de tempo, recomendamos armazená-la em sua embalagem original.



Atenção

Antes de guardar, deixe a manta elétrica esfriar para não danificá-la.
Não coloque objetos sobre a manta elétrica enquanto estiver armazenada para evitar danos.

7. Descarte

Elimine o aparelho de acordo com a Diretiva Brasileira relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. Para mais informações, por favor contate a autoridade municipal responsável pela eliminação de resíduos.

8. Solução de problemas

Problema	Causa	Solução
O visor não ilumina nem indica nada.	O plugue não está conectado à tomada de energia e/ou não está ligado.	Conecte o plugue e ligue a manta elétrica.
O controlador de temperatura não liga.	A fonte de energia está queimada.	Envie o produto para a assistência técnica.

9. Dados técnicos

- Produto fabricado na Coreia
- Tecido Externo:
100% Brim
- Camadas Internas:
Uretano silício, algodão, cascalho de minerais, fibra de vidro, fibra de cerâmica de carbono, seda.
- Importado por Inspire Produções e Representações Ltda ME - CNPJ 09.232.145/0001-92