



MANUAL DO USUÁRIO

Produto: Biomat Acoustic Pro

PORTUGUÊS

Conteúdo

Precauções de segurança.....	02
Trilhas Sonoras.....	03
Componentes do produto.....	06
Características do produto.....	07
Configuração do produto.....	08
Operação do produto.....	08
Usando uma fonte de som externa.....	09
Usando fones de ouvido.....	09
Informações úteis.....	10
Especificações e normas.....	10
Informações de atendimento ao cliente	11
Garantia do produto.....	11

Precauções de segurança

Leia e siga todas as instruções deste manual antes de usar.

1. O uso adequado do Colchão Biomat Acoustic Pro evitará danos ao usuário e danos à propriedade privada.
2. Utilize o Colchão Biomat Acoustic Pro apenas para os fins especificados neste manual. Para reduzir o risco de eletrocussão:
3. Não use ou armazene perto da água. Se o colchão Biomat Acoustic Pro ficar molhado, desconecte-o imediatamente.
4. Não altere, modifique ou desmonte o produto.
5. Use a voltagem adequada. Não utilize se o cabo de alimentação ou plug parecer danificado. Não exponha o cabo a material quente.
6. Atenção, para reduzir o risco de lesão ou mau funcionamento do produto: Se você não se sentir bem devido ao Colchão Biomat Acoustic Pro, pare de usá-lo e consulte um médico.
7. Desligue o colchão Biomat Acoustic Pro da tomada quando não estiver sendo utilizado ou durante a limpeza.
8. Somente adultos devem operar o Colchão Biomat Acoustic Pro. Idosos e crianças devem ser monitorados.
9. Não use ao ar livre.
10. Não puxe o cabo de alimentação.
11. Não fique em pé ou coloque objetos pesados no Colchão Biomat Acoustic Pro. Não coloque objetos pontiagudos sobre ou perto do Colchão Biomat Acoustic Pro.
12. Evite choques externos ao dispositivo, como derrubá-lo ou atingi-lo com força.
13. Consulte o seu médico antes de utilizar este produto se: você está grávida, tem um marca-passo, ou tem quaisquer preocupações em relação à sua saúde.
14. Nunca use este produto diretamente em áreas inchadas ou inflamadas ou erupções da pele.
15. Pare de usar o Biomat Acoustic Pro se ele não estiver funcionando corretamente. Ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente.

Trilhas Sonoras

Configuração Vibroacústica

(CONJUNTO 1) ENERGIZAR

Guitarra, piano, som digital, baixo Mono e binaural high alpha e beta entrainment

1. Energize (comprimento da faixa 5:18) Pitch baixo 41 Hz - 73 Hz Comprimento de onda de pico 41Hz
2. Energize (comprimento da faixa 4:40) Pitch baixo 36 Hz - 61 Hz Comprimento de onda de pico 41Hz
3. Energize (comprimento da faixa 5:55) Passo baixo 36 Hz - 65 Hz

(CONJUNTO 2) RELAXAR

Sons digitais do oceano, do surf e da natureza

1. Relax (comprimento da faixa 5:15) Pitches baixos centrados em torno de 40 Hz, 52 Hz e 68 Hz (34 Hz) Arraste mono e binaural alfa e (5 Hz - 8 Hz)
2. Relaxe (comprimento da faixa 4:40) Pitch baixo – 36 Hz Binaural alfa, e theta entrainment
3. Relaxe (comprimento da faixa 5:35) Pitch baixo – 32 Hz Binaural alfa, e theta entrainment

(CONJUNTO 3) DORMIR

Arraste de som digital mono e delta binaural

1. Sono (comprimento da faixa 4:58) Pitch baixo – 32 Hz
2. Sono profundo (duração da faixa 5:00) Pitch baixo – múltiplo entre 27,5 – 44 Hz
3. Sono profundo (duração da faixa 6:05) Pitch baixo – múltiplo entre 34 – 52 Hz


(CONJUNTO 4) ALÍVIO DO ESTRESSE

Piano, flauta, som digital

1. Alívio de tensão (comprimento da faixa 3:30) Baixas frequências – 36 Hz – 41 Hz Arraste mono e binaural 4 Hz – 6 Hz
2. Alívio de tensão (comprimento da faixa 3:00) Baixas frequências – 32 Hz – 65 Hz Arraste mono e binaural 4 Hz – 6 Hz
3. Alívio de tensão (comprimento da faixa 3:40) Baixas frequências – 27,5 Hz – 55 Hz Arraste mono em delta, e alfa. Arraste binaural 4 Hz – 6 Hz


Onda delta (0,5-4,0 Hz)

As ondas delta estão associadas aos níveis mais profundos de relaxamento físico. Delta é o ritmo do sono sem sonhos e sua presença geralmente corresponde ao rejuvenescimento físico e à cura.

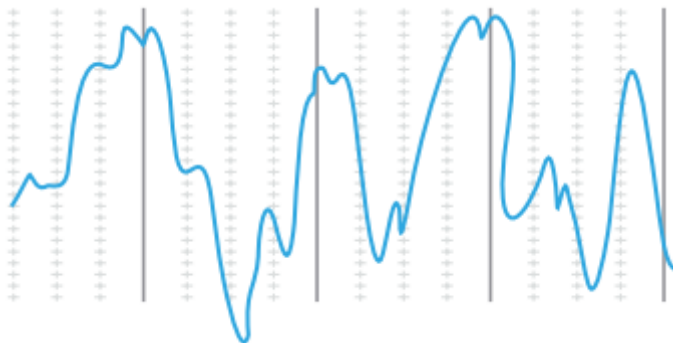


Onda Theta (4,0-7,0 Hz)

As ondas Theta refletem um estado mental que está sintonizado com intensa criatividade, visualização e resolução de problemas subconscientes em um estado que não dorme, bem como cura emocional no estado de sono. As ondas Theta são produzidas durante a meditação profunda e sonhando acordado.

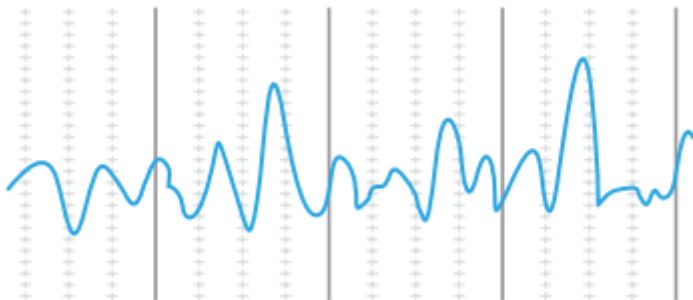


Onda alfa (7,0-12,0 Hz)

As ondas alfa indicam um estado de alerta com uma mente tranquila (por exemplo, uma pessoa que completou uma tarefa e se senta para descansar está frequentemente em um estado Alfa). O aumento do alfa está frequentemente presente nas ondas cerebrais de pessoas que praticam meditação, ioga e tai chi.

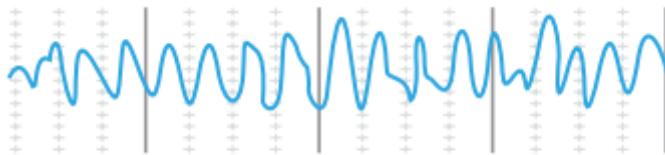


Onda beta (12,0-27,0 Hz)

As ondas beta estão associadas a estados normais de vigília que experimentamos no dia a dia no trabalho e no lazer. Nos estados Beta, estamos altamente alertas e focados – ocupados, computando, e organizando – dando sentido ao mundo externo. O beta é aumentado em momentos de estresse ou ansiedade, permitindo-nos gerenciar situações e resolver problemas imediatos.

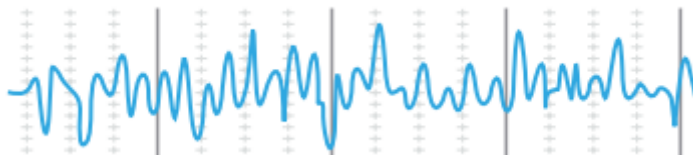

Componentes do produto


O Biomat Acoustic Pro virá com os seguintes componentes.

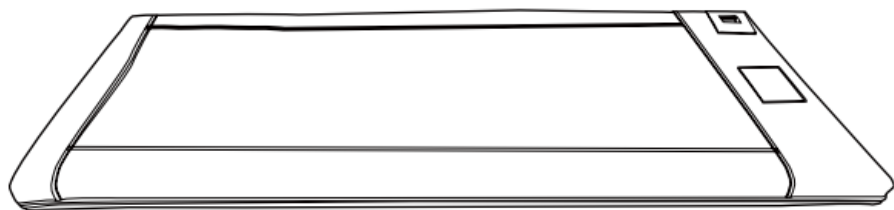


Colchão



Controle

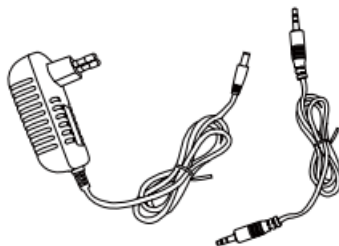

Adaptador de corrente e Cabo de áudio

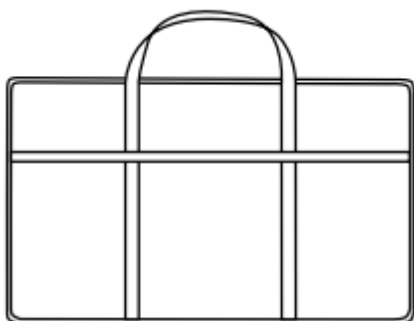

Bolsa de transporte



Manual

Características do produto

Colchão Biomat Acoustic Pro

1. Alto-falante de áudio estéreo
2. Gerador de baixa frequência
3. Tomada do adaptador de alimentação
4. Tomada do controlador
5. Fone de ouvido



Controlador

1. Janela de exibição
2. Botão de seleção de faixa
3. Botão de controle de vibração
4. Botão liga/desliga
5. Botão Volume
6. Botão Timer
7. Adaptador de alimentação
8. Cabo de áudio



Configuração do produto

1. Coloque o Biomat Acoustic Pro em uma superfície plana.
2. Conecte o controlador à tomada do controlador localizada na parte superior esquerda frontal do Biomat Acoustic Pro.
3. Conecte o adaptador de alimentação à tomada do adaptador de energia. Em seguida, conecte o conchão™ Biomat Acoustic Pro a uma tomada.



Tomada do controlador

Tomada do adaptador de alimentação

Ao usar o Biomat Acoustic Pro com qualquer colchão de aquecimento, certifique-se de usar uma manta fina entre os dois.

O alongamento é uma característica natural do vinil novo, e nas primeiras vezes que você usar o colchão, algum alongamento ocorrerá. O produto é simplesmente alongado sob seu peso corporal, e isso é normal para os primeiros usos.

Operação do produto

Selecionando a trilha sonora

1. Pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga por um segundo para ligar a unidade. O colchão™ Biomat Acoustic Pro será iniciado automaticamente na trilha sonora da terapia Energize. Ele será exibido na janela de exibição do controlador. Você pode ajustar a intensidade ou volume para o nível desejado. (Veja pág. 11)

2. Se você deixá-lo na sessão de terapia Energize, o colchão™ Biomat Acoustic Pro tocará automaticamente as três trilhas sonoras da terapia Energize.

3. Para tocar a faixa dois da sessão de terapia energética, pressione o botão Energize novamente.

4. Para tocar a faixa três da sessão de terapia energética, pressione o botão Energize novamente.

5. Quando você pressionar o botão da sessão de terapia Energize após a faixa três, a sessão de terapia Energize reaparecerá na tela de exibição. As faixas de energização um, dois e três começarão a tocar repetidas.

- Se você não definir o temporizador ou alterar as trilhas sonoras, a sessão se repetirá.

Ajustando a intensidade da vibração

O colchão™ Biomat Acoustic Pro proporciona vibrações de baixa frequência. Para aumentar a intensidade, pressione o botão +. Para diminuir a intensidade, pressione o botão -.

Ajustando o volume

Pressione o botão + **Volume** para aumentar o volume e pressione o botão - **Volume** para diminuir o volume.

Temporizador

Pressione o botão do temporizador para selecionar o tempo de execução desejado. O colchão™ Biomat Acoustic Pro pode ser configurado para funcionar por 15, 30, 45 ou 60 minutos. O colchão™ Biomat Acoustic Pro será desligado automaticamente após o tempo desejado.

Usando uma fonte de som externa

Reproduza sua própria música com o colchão™ Biomat Acoustic Pro. Multinacional

1. Usando o cabo de 3,5 mm (cabo de áudio incluído), conecte o cabo do dispositivo de áudio à entrada de som externa localizada no lado esquerdo do controlador Biomat Acoustic Pro.

2. O Biomat Acoustic Pro começará a reproduzir a música a partir do seu dispositivo de áudio. Ajuste o volume no dispositivo conectado para perto do máximo. Em seguida, use os botões Volume + e - no controle para ajustar o nível de volume.

Usando fones de ouvido

Você pode conectar seus fones de ouvido ao Biomat Acoustic Pro™ e ouvir

música sem incomodar os outros.

1. Conecte seus fones de ouvido à entrada para fones de ouvido localizada na parte superior esquerda frontal do colchão™ Biomat Acoustic Pro. Ajuste o volume com os botões Volume + e – no controlador.

- Use fones de ouvido de alta qualidade para aproveitar ao máximo sua experiência com o colchão™ Biomat Acoustic Pro.

Informações úteis

- Antes de limpar o produto, desligue a energia e desconecte o cabo de energia.
- Ao limpar a parte externa do produto, use um pano úmido com sabão ou detergente neutro.
- Não use detergente químico forte, pois pode danificar a área de plástico ou almofada.
- Não fique em pé ou coloque objetos pesados no Biomat Acoustic Pro
- Armazenar em local seco e arejado.

Especificações e normas

Item	Conteúdo
Nome do produto	Colchão™ Biomat Acoustic Pro
Nome do modelo	BTC 7000MX™ Profissional
Nome e endereço da empresa do fabricante	Nome da Empresa: R&L Co., Ltd. Endereço: (Soha-dong, Ace Gwangmyung Tower, 11th floor) 108, Haan-ro, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, República
País de Fabricação	República da Coreia
Tamanho do produto (L x W x H)	73" X 28" X 3" (1850 X 700 x 80 mm)
Número de série	Marcado separadamente
Peso	14,51 kg
Adaptador	Entrada (100-240V~60Hz 0.5A MAX), Saída (12V, 2500mA)

Item	Conteúdo
Nome do produto	Colchão Bioacústico
Nome do modelo	BTC 7000MX™ Único
Nome e endereço da empresa do fabricante	Nome da Empresa: R&L Co., Ltd. Endereço: (Soha-dong, Ace Gwangmyung Tower, 11th floor) 108, Haan-ro, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, República
País de Fabricação	República da Coreia
Tamanho do produto (L x W x H)	79" x 39" x 3" (2000 x 1000 x 80 mm)
Número de série	Marcado separadamente
Peso	16,78 kg
Adaptador	Entrada (100-240V~60Hz 0.5A MAX), Saída (12V, 2500mA)

Informações de atendimento ao cliente

Se o seu colchão™ Biomat Acoustic Pro não estiver funcionando corretamente ligue para a nossa Central de Atendimento ao Cliente

Garantia do produto

A Richway & Fuji Bio garante que o produto coberto está livre de defeitos e avarias no momento da venda. "Defeitos", conforme utilizado nesta garantia, é definido como imperfeições, que prejudicam ou impedem o funcionamento e uso do produto.

Quanto tempo dura a garantia

Esta garantia dura 1 ano a partir da data de entrega. Esta garantia estende-se apenas ao comprador original. A cobertura termina se você vender ou transferir a propriedade.

O que esta garantia cobre

Esta garantia cobre quaisquer defeitos ou mau funcionamento nos componentes eletrônicos e na substituição da tampa superior. Se a Richway & Fuji Bio determinar que tais bens estão defeituosos, dentro do período desta garantia, a Richway & Fuji Bio reparará ou substituirá as peças gratuitamente durante o primeiro ano. O reparo ou substituição é o único e exclusivo recurso disponível para o comprador e constituirá o cumprimento de todas as obrigações da Richway & Fuji Bio em relação aos bens fornecidos sob este contrato.

O que esta garantia não cobre

Esta garantia não cobre abuso, mau uso, desastre natural, fornecimento elétrico insuficiente ou excessivo, desgaste comum, desbotamento, falha em seguir instruções e manutenção inadequada. A Richway & Fuji Bio não será responsável por quaisquer danos incidentais ou consequenciais como resultado direto de negligência ou uso indevido. Esta garantia não se estende à compra de produtos abertos, usados, reparados, reembalados e/ou relacrados, incluindo, mas não se limitando a, venda de tais produtos em sites da Internet e/ou vendas de tais produtos em sites de leilões na Internet e/ou vendas de tais produtos por revendedores excedentes ou em massa. Quaisquer garantias ou garantias cessarão imediatamente e terminarão em relação a quaisquer produtos ou partes dos mesmos que sejam reparados, substituídos, alterados ou modificados, sem o consentimento prévio, expresso e por escrito, da Richway & Fuji Bio.

Como obter o serviço

Para obter o serviço sob esta garantia, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente local e forneça o nome do comprador, o número do RI (Richway Invoice) e uma descrição detalhada do problema que você está enfrentando. Eles fornecerão um número de autorização de devolução de mercadoria (RMA). Este número é obrigatório e deve ser colocado em uma área visível na frente da embalagem. Envie seu produto com porte pago, inclua uma cópia do boleto de venda original, recibo de cartão de crédito ou outro comprovante da data da compra original no varejo. Se a manutenção ocorrer nos primeiros dois (2) meses, enviaremos uma etiqueta de envio pré-paga para cobrir seus custos de envio. Se a manutenção for feita a partir do terceiro mês, o cliente é responsável pelos custos de envio para devolver o produto para reparo ou substituição. Cobriremos os custos de envio para devolver o produto ao cliente.