



# MANUAL DO USUÁRIO

Produto:

**Biobelt**  
Tamanho regular: 12,7 cm de largura x 140 cm de comprimento – 1,1kg  
Tamanho grande: 12,7 cm de largura x 160 cm de comprimento – 1,2kg  
  
Tensão:  
110V – 50W  
220V – 50W

PORTUGUÊS

Conteúdo

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Precauções de segurança.....                                                       | 02 |
| Ler antes de operar o produto.....                                                 | 02 |
| Componentes do produto.....                                                        | 03 |
| Descrição do produto.....                                                          | 03 |
| Instalação do produto.....                                                         | 04 |
| Lista de verificação antes da instalação do produto.....                           | 04 |
| Lista de verificação após a instalação do produto.....                             | 05 |
| Especificações do produto.....                                                     | 05 |
| Como utilizar o produto.....                                                       | 06 |
| Informações úteis.....                                                             | 08 |
| Como limpar e armazenar o produto.....                                             | 08 |
| Guia de resolução de problemas .....                                               | 08 |
| Verifique antes de entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente ..... | 09 |
| Informações de atendimento ao cliente .....                                        | 10 |
| Informações de fabrico do produto.....                                             | 10 |
| Especificação de aplicação .....                                                   | 10 |
| Garantia do produto.....                                                           | 10 |

# Precauções de segurança

1. Não utilize o Biobelt se a sua pele for insensível à mudança de temperatura.
2. Se usar o Biobelt por um longo período de tempo, verifique sua pele para se certificar de que não haja queimaduras ou bolhas. Pare de usar o Biobelt se ocorrerem queimaduras ou bolhas.
3. Não corra, fique em pé ou coloque objetos pesados no Biobelt.
4. Mantenha o Biobelt longe de objetos pontiagudos. Não permita que nada fure as dobras do cinto.
5. Não puxe a ficha de alimentação, o controlador ou a parte de conexão do controlador e Biobelt.
6. Não utilize o Biobelt para qualquer outro fim que não a terapia térmica.
7. Não altere, troque ou desmonte o produto.
8. Antes de usar o produto, inspecione o cabo de alimentação para se certificar de que não haja danos a ele.
9. Não ligue o Biobelt a uma barra de alimentação com outros dispositivos. Podem ocorrer problemas. Conecte o Biobelt a uma tomada dedicada.
10. Pare de usar o Biobelt se ele não estiver funcionando corretamente.
11. Se houver falta de energia, desligue a energia e desconecte a tomada.
12. Se você não se sentir bem por causa do Biobelt, pare de usá-lo e consulte um médico.
13. Não derrube, jogue ou manuseie mal o controlador Biobelt.
14. Se você tiver as seguintes condições, não use o Biobelt:
  - Pessoa com transplante de órgãos
  - Pessoa com febre alta
  - Pessoa com deficiência cognitiva
  - Pessoa com problemas de pele na área de uso
  - Pessoa com doença aguda, tumor agudo, deficiente visual e quaisquer problemas cardíacos
15. Se você tiver as seguintes condições, não use o Biobelt a menos que indicado por um médico:
  - Pessoa com imobilidade - Pessoa com marca-passo/desfibrilador interno
  - Pessoa com Distúrbios de Supressão Adrenal, Doença de Addison, Insuficiência Adrenal, Lúpus Eritematoso Sistemático e Esclerose Múltipla (EM).
  - Pessoa com cirurgia de by-pass
  - Pessoa com diabetes - Pessoa com pressão alta (hipertensão)
  - Bebês
  - Pessoa grávida/grávida
  - Pessoa que recebeu recentemente radioterapia/quimioterapia
  - Pessoa com implantes cirúrgicos ou de silicone
16. Se você tiver as seguintes condições, use o Biobelt com cautela (sem calor/ions negativos apenas):
  - Pessoa com febre
  - Pessoa com lesões articulares

- Pessoa com insensibilidade ao calor

17. Qualquer pessoa doente ou grávida/grávida deve consultar um médico antes de utilizar o Biobelt.

18. Não utilize o Biobelt se tiver um marca-passo externo.

19. Se o controlador estiver configurado para 104° - 140°F (40° - 60°C), queimaduras de baixa temperatura podem resultar se o uso do Biobelt por um longo período de tempo. Use com cautela.

20. Quando o Biobelt não estiver em uso, desconecte-o da tomada e guarde-o em uma área seca e sem umidade.

21. Desligue o Biobelt da tomada antes de limpá-lo. Use um aspirador para remover a poeira na superfície do Biobelt e use um tecido seco e macio para limpar o controlador

## Leia antes de operar o produto

### Componentes do produto


A caixa conterá o Biobelt, controlador com cabo de alimentação e um manual do usuário.

※ Os componentes podem mudar sem aviso prévio devido à melhorias do produto.

### Descrição do produto


Cada parte do Biobelt e como operá-lo são descritos aqui.

## Biobelt

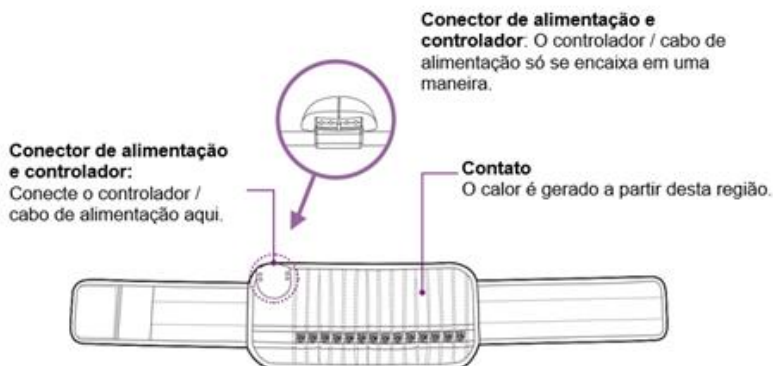

## Controle:

**Janela de indicação de temperatura:** A temperatura atual do Biobelt é indicada. (Valor de indicação: 95 ~ 149°F / 35 ~ 65°C)

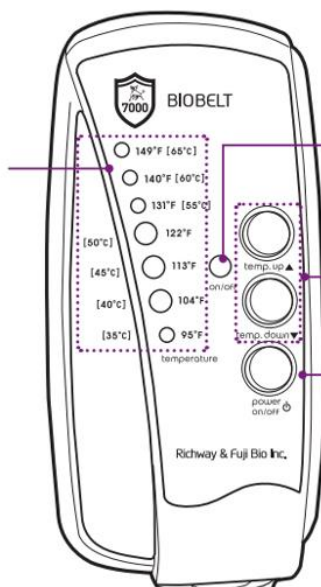

**Lâmpada indicadora de energia:** Quando o Biobelt é ligado, a luz ficará verde.

**Botão de controle de temperatura:** Suba ou abaixe a temperatura pressionando estes botões.

**Botão liga/desliga:** Desligue ou ligue a pressionando este botão

## Instalação do produto

### Lista de verificação antes da instalação do produto



#### Verifique o seguinte antes de usar o Biobelt.

1. Não use o produto em áreas com alta umidade ou poeira significativa.
2. Manuseie o Biobelt com cuidado. Qualquer impacto físico, como a queda do Biobelt, pode danificar componentes internos.
3. Verifique a voltagem antes de instalar o produto.
  - Tensão para o produto: 127V ou 220V
  - Choque elétrico ou danos ao Biobelt podem resultar de tensão inadequada.
  - A tensão do Biobelt deve ser a mesma do controlador. (127V Biobelt + 127V controlador / 220V Biobelt + 220V controlador)
4. Inspeção o plugue, o cabo de alimentação e a tomada para verificar se há danos.
  - Não utilize o Biobelt se algum dos itens acima estiver danificado. Choque elétrico ou incêndio pode resultar de componentes danificados.

## Para operar o Biobelt, siga os passos abaixo.

1. Primeiro, conecte o controlador / cabo de alimentação à porta de conexão do Biobelt.

2. Em segundo lugar, conecte o controlador / cabo de alimentação em uma tomada de 127V ou 220V conforme indicação de voltagem do produto

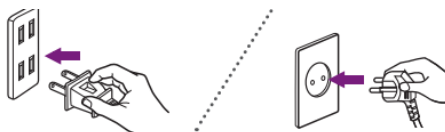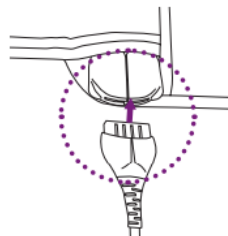

## Lista de verificação após a instalação do produto

### Teste o Biobelt.

Depois de ligar o Biobelt, verifique o seguinte para se certificar de que o Biobelt está funcionando corretamente:

1. Pressione o botão liga/desliga no controle e verifique se há problemas no sistema de plugue/energia.
2. Depois de ligar o Biobelt, certifique-se de que a luz de alimentação fica verde.
3. Pressione o botão de ajuste de temperatura para ver se ele está funcionando corretamente.
  - Se o botão do controlador não estiver funcionando corretamente, entre em contato com nossa Central de Atendimento ao Cliente.

## Especificações do produto

| Categoria          | Conteúdo                                                                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produto            | Biobelt                                                                                                                               |
| Tamanho do produto | 210 x 460 mm                                                                                                                          |
|                    | 1) Parte interna da joia: Comprimento 46 cm x largura 21 cm<br>2) Comprimento total, incluindo o cinto: 140cm (regular) ou 160cm (XL) |

|                                                        |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso ou unidade de embalagem                           | 1) Controlador: 0.38 KG<br>2) Corpo principal do cinto: 0.93KG<br>3) Peso total: 1.6 KG                                                                 |
| Temperatura máxima                                     | 149°F / 65°C<br>(O Biobelt é programado para evitar o superaquecimento.)                                                                                |
| Outros assuntos necessários                            | Tensão, frequência: 127V~, 60Hz, / 220V~, 60Hz                                                                                                          |
|                                                        | Temperatura de operação: 95 ~ 149 °F / 35 ~ 65 °C                                                                                                       |
| Tipo de proteção contra equipamento de choque elétrico | Classe II ME                                                                                                                                            |
| Grau de proteção contra choque elétrico                | Peças aplicadas classe BF<br>- Peças aplicadas: Parte superior da esteira                                                                               |
| Grau de proteção contra entrada nociva de água         | Equipamento ordinário (IPX0)<br>- Equipamento impróprio para uso na presença de anestésico inflamável, mistura com ar ou com oxigênio ou óxido nitroso. |
| Modo de operação                                       | Operação contínua                                                                                                                                       |

※ O Biobelt desliga-se automaticamente após 2 horas.

| Equipamento ME Classe II (seguro contra falha única) |              |                     |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
|                                                      | Modo Normal  | Modo de falha única |
| Toque atual                                          | < 100 microA | < 500 microA        |
| Corrente de fuga à terra                             | < 5 mA       | < 10 mA             |

Os testes de acordo com a IEC 60601-1-2 indicam o seguinte: O Biobelt não precisa de precauções especiais em relação à EMC antes de ser colocado em serviço. Equipamentos portáteis e móveis de comunicação RF não têm efeitos adversos sobre o Biobelt.


## Modo de utilização do produto

### Ativando e desativando

O Biobelt pode ser usado nas pernas, braços, ombros e cintura. Seu tamanho pequeno facilita o transporte.

1. Ligue o Biobelt pressionando o botão [Power]. A luz indicadora ficará verde.


Verifique se a luz indicadora de energia está acesa quando a energia está ligada. Se a lâmpada não estiver acesa após ligar o produto, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente.

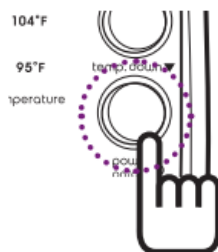

### Ajuste da temperatura do produto


1. Quando a energia estiver ligada, pressione o botão [Temperature Up / Down] para definir a temperatura desejada.

- Faixa de temperatura: 95 ~ 149 °F / 35 ~ 65 °C
- Quando o botão [Temperature Up] é pressionado uma vez, a temperatura é aumentada em 5°C (9°F) de cada vez, e quando o botão [Temperature Down] é pressionado uma vez, a temperatura é diminuída em 5°C (9°F)

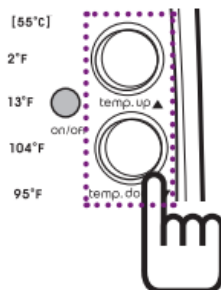

2. Ao ajustar a temperatura, a lâmpada indicadora mudará de cor dependendo da temperatura escolhida.

- Definido para 95° ~ 104°F (35° ~ 40°C): A luz verde é acesa na parte de indicação de temperatura do controlador.
- Definido para 113° ~ 131°F (45° ~ 55°C): A luz amarela é acesa na parte de indicação de temperatura do controlador.
- Definido para 140° ~ 149°F (60° ~ 65°C): A luz vermelha é acesa na parte de indicação de temperatura do controlador.

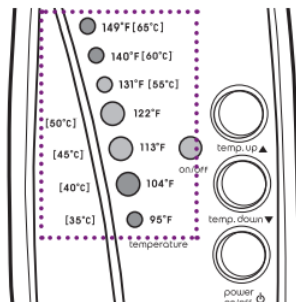

3. Uma vez selecionado, o Biobelt aquecerá até a temperatura adequada.

4. Coloque o Biobelt ao redor de suas pernas, braços, ombros ou cintura com as pedras preciosas voltadas para dentro (as pedras preciosas são visíveis através das tiras de vinil transparentes). Ajuste o cinturão para prender o Biobelt.

Não coloque o Biobelt diretamente sobre a pele. Isso pode causar queimaduras ou lesões na pele. Coloque uma toalha entre o Biobelt e a pele durante o uso.

O Biobelt desliga-se automaticamente após 2 horas de utilização contínua. Para continuar usando o cinturão, ligue-o novamente e ajuste a temperatura.

## Informações úteis

### Como limpar e armazenar o produto

#### Verificar após o uso do Biobelt

- Depois de usar o Biobelt, desligue-o pressionando o botão [Power].
- Quando a energia estiver desligada, separe o plugue de alimentação da tomada

#### Como limpar o Biobelt

Se o Biobelt tiver umidade ou suor, use uma toalha seca para limpá-lo.

- Não deixe umidade no Biobelt após a limpeza do produto.

#### Ao limpar o Biobelt, não lave com água ou limpeza a seco.

- Isso pode causar choque elétrico ou curto-circuito.

Ao limpar o Biobelt, certifique-se de desligar a energia e desconectá-lo.

#### Como armazenar o Biobelt

- Guarde o Biobelt aberto (não dobrado) e em uma área bem ventilada.
- Separe o controlador do Biobelt e coloque-o em um saco.

#### Armazenamento/Transporte do Produto

O Biobelt deve ser armazenado e transportado de acordo com as seguintes condições apropriadas

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Armazenamento/Transporte de Produtos | <ul style="list-style-type: none"><li>- Temperatura de armazenamento: 32 ~ 113 °F / 0 ~ 45 °C</li><li>- Temperatura de transporte: -13 ~ 158 °F / -25 ~ 70 °C</li><li>- Umidade: 15 ~ 93%</li><li>- Pressão de ar: 700 ~ 1060 hPa</li></ul> |
|                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Coloque sem umidade e sem luz solar direta.</li><li>- Local sem poeira e com boa ventilação.</li></ul>                                                                                              |

## Guia de solução de problemas

Se a lâmpada de alarme do controlador estiver piscando durante o uso do Biobelt, siga este guia. Se a lâmpada de alarme continuar a piscar após o seguinte método, pare de usar o produto e entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente.



| <b>Lâmpada indicadora</b>                    | <b>Causa</b>                     | <b>Método de resolução</b>                                                                       |
|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A lâmpada de 149°F está piscando em vermelho | A conexão Biobelt não é segura   | Verifique se o cabo Biobelt está conectado adequadamente ao controlador.                         |
|                                              | Sensor de temperatura defeituoso | O fio do sensor de temperatura está quebrado. Entre em contato com nossa Central de Atendimento. |

## **Verifique antes de entrar em contato com o atendimento ao cliente.**

Se houver alguma avaria durante o uso do produto, verifique os conteúdos a seguir antes de entrar em contato com nossa Central de Atendimento.

| <b>Problema</b>                                                                          | <b>Método de resolução</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O interruptor liga/desliga está ligado, mas a luz indicadora de energia não está ligada. | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Verifique se a fonte de alimentação está bem ligada à tomada.</li> <li>-Verifique se a tensão da tomada é 127V ou 220V.</li> <li>-Conecte o plugue corretamente, mas se ele ainda não funcionar corretamente, entre em contato com nossa Central de Atendimento ao Cliente.</li> </ul>                                                                                            |
| A temperatura está definida, mas o Biobelt não está funcionando.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Verifique se o Biobelt e o controlador estão conectados corretamente.</li> <li>-Desligue a fonte de alimentação e separe o cabo de alimentação do controlador. Em seguida, volte a ligá-lo novamente.</li> <li>-Conecte o cabo de alimentação corretamente, mas se ele ainda não funcionar corretamente, entre em contato com nossa Central de Atendimento ao Cliente.</li> </ul> |
| Durante o uso do Biobelt, a energia desliga repentinamente.                              | -Desligue a energia e ligue-a novamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A lâmpada de alarme está com a luz vermelha acesa e o Biobelt não está funcionando.      | -Se a lâmpada de alarme estiver acesa, desligue a alimentação imediatamente e separe o cabo de alimentação e, em seguida, contacte o nosso Centro de Apoio ao Cliente.                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Informações de atendimento ao cliente

Se o seu Biobelt não estiver funcionando corretamente, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

## CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Biomat - Brasil

21 98561-1010

## Informações de fabricação do produto

As informações do certificado de fabricação completa do produto são anexadas à parte traseira do controlador e à parte traseira do Biobelt.

## Especificação da aplicação

### INDICAÇÕES PARA USO

O Biobelt é indicado para o alívio temporário de pequenas dores e rigidez muscular e articular; o alívio temporário da dor articular associada à artrite; o alívio temporário de espasmos musculares, pequenas entorses e tensões, e pequenas dores musculares nas costas; o relaxamento dos músculos; e o aumento temporário da circulação local, quando aplicado.

## Garantia do produto

| Informações sobre o pedido | Nome do produto     | Biobelt                                      | Nome do modelo       |
|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|
|                            | Período de garantia | 3 anos a partir da data de compra do produto | Número de fabricação |
|                            | Data da compra      |                                              | Ramo de compra       |
| Informações do cliente     | Nome                |                                              | Preço de compra      |

A Richway & Fuji Bio garante que o produto coberto está livre de defeitos e avarias no momento da venda. "Defeitos", conforme utilizado nesta garantia, é definido como imperfeições, que prejudicam ou impedem o funcionamento e uso do produto.

## Quanto tempo dura a garantia

Esta garantia dura 3 anos a partir da data de entrega. Esta garantia estende-se apenas ao comprador original. A cobertura termina se você vender ou transferir a propriedade.

## O que esta garantia cobre

Esta garantia cobre quaisquer defeitos ou mau funcionamento nos componentes eletrônicos, elemento de aquecimento e substituição da tampa superior. Se a Richway

& Fuji Bio determinar que tais bens estão defeituosos, dentro do período desta garantia, a Richway & Fuji Bio reparará ou substituirá as peças gratuitamente durante o primeiro ano. O reparo ou substituição para o segundo e terceiro ano requer uma taxa, que pode ser encontrada em nosso site. O reparo ou substituição é o único e exclusivo recurso disponível para o comprador, e constituirá o cumprimento de todas as obrigações da Richway e Fuji Bio em relação aos bens fornecidos sob este contrato.

## **O que esta garantia não cobre**

Esta garantia não cobre abuso, mau uso, desastre natural, fornecimento elétrico insuficiente ou excessivo, desgaste comum, desbotamento, falha em seguir instruções e manutenção inadequada. A Richway & Fuji Bio não será responsável por quaisquer danos incidentais ou consequenciais como resultado direto de negligência ou uso indevido. Esta garantia não se estende à compra de produtos abertos, usados, reparados, reembalados e/ou selados, incluindo, mas não se limitando a, venda de tais produtos em sites da Internet e/ou vendas de tais produtos em sites de leilões na Internet e/ou vendas de tais produtos por vendedores excedentes ou em massa. Todas e quaisquer garantias ou garantias cessarão imediatamente e terminarão em relação a quaisquer produtos ou partes dos mesmos que sejam reparados, substituídos, alterados ou modificados, sem o consentimento prévio, expresso e por escrito, da Richway & Fuji Bio.

## **Como obter o serviço**

Para obter o serviço sob esta garantia, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente local e forneça o nome do comprador, o número do RI (Richway Invoice) e uma descrição detalhada do problema que você está enfrentando. Eles fornecerão um número de autorização de devolução de mercadoria (RMA). Este número é obrigatório e deve ser colocado em uma área visível na frente da embalagem. Envie seu produto com porte pago, inclua uma cópia do boleto de venda original, recibo de cartão de crédito ou outro comprovante da data da compra original no varejo. Se a manutenção ocorrer nos primeiros dois (2) meses, enviaremos uma etiqueta de envio pré-paga para cobrir seus custos de envio. Se a manutenção for feita a partir do terceiro mês, o cliente é responsável pelos custos de envio para devolver o produto para reparo ou substituição. Cobriremos os custos de envio para devolver o produto ao cliente.

Frente



Lado

